

## RIDA スクリーン 残留ホルモン剤 シリーズ

### 食品・環境中の残留ホルモンの定量 ELISA キット

食肉や尿中等に残留するホルモンのスクリーニング定性検査および定量を目的とする ELISA (酵素免疫測定) 法キットです。機器分析と比べて、高価な設備を要せず、前処理も簡単で、キット操作約3時間で定量できます。メーカー r-Biopharm 社 (ドイツ) は ISO9001 認証済みで、精度・再現性の高いキットとして評価されています。ここで紹介されるホルモン剤キットのほか、抗菌性物質などのキットもあります。また性ホルモンのキットには河川水中における環境ホルモン様物質調査に用いられているものもあります。

品名 コードNo. 価格・仕様	RIDA スクリーン 残留ホルモン剤 シリーズ (製造: r-Biopharm 社)	
	アセチルゲスターゲン(6231P)	メレンゲストロールアセテート(6232P)
	17β-エストラジオール(6311P)	エチニルエストラジオール(6312P)
	ジェチルステルベストロール(6331P)	ゼラノール(6332P)
	テストステロン(6411P)	19-ノルテストステロン(6412P)
	メチルテストステロン(6413P)	トレンボロン(6431P)
	クレンプテロール Fast (6512P)	クレンプテロール(6511P)
	ラクトパミン (R9901)	β-アゴニスト (R1703)
	全キットとも 96 ウェル 78,000 円	
キット内容	マイクロプレート(96 ウェル:8 ウェル 12 本)(1ウェルづつはずせます) 標準液5濃度各1本、酵素複合体液、基質液、発色液、反応停止液、バッファー、抗体液等	
目的・用途	特定ホルモンの定量分析ないしは定性スクリーニング	
原理と	マイクロプレート式 ELISA 法(競合法)(二重抗体=例外あり)	
検出限界	アセチルゲスターゲン(MPA 等)	メレンゲストロールアセテート(MGA)
	感度 30ppt 標準液 0.15, 0.45, 1.35, 4.05, 12.15ppb 交差反応 Medroxyprogesteron acetate 100% 17a-Acetoxyprogesterone 126% Megestrol acetate 50% Chloromadinone acetate 50% Melengestrol acetate 0.6% 回収率: 50% 前処理: 抽出(一晚)、凍結、遠心分離、再抽出、凍結、遠心分離、乾燥、洗浄、C18 カラム精製 キットインキュベーション: 2 時間 30 分	感度 筋肉 75ppt 脂肪 300ppt 標準液 0.15、0.45、1.35、4.05、12.15ppb 交差反応 Melengestrol Acetate 100% Megestrol Acetate 10.0% Medroxyprogesteron acetate 6.6% Chlormadinone acetate 5.2% 17a-Acetoxyprogesterone 4.8% 16a-Methylprogesterone 0.0035% 回収率 肉 約 74% 脂肪 約 65% 前処理: 抽出(一晚)、凍結、乾燥、凍結、遠心分離、C18 カラム精製 キットインキュベーション: 2 時間 30 分

本品は食品衛生・環境等に関わる自主検査用キットであり、臨床検査等診断に用いることはできません。必ず取扱説明書等をご覧ください、使用・保管・廃棄等の方法には充分ご注意ください。なお、価格・仕様など、内容を予告無く変更する場合があります。

**食品・飼料・環境検査キット <きつとセーフ> シリーズ**

<p>17β エストラジオール</p> <p>感度 血漿 20ppt</p> <p>標準液 0.05、0.2、0.8、3.2、12.8ppb</p> <p>交差反応 17β-Estradiol 100% Estradiol-3-benzonate 50% Trenbolon 1%</p> <p>回収率 血漿 約 85%</p> <p>前処理:抽出、凍結乾燥 キットインキュベーション:2 時間 30 分</p>	<p>エチニルエストラジオール</p> <p>感度 尿 200ppt</p> <p>標準液 0.05、0.2、0.8、3.2、12.8ppb</p> <p>交差反応 Ethinyl estradiol 100% 17β-Estradiol 0.7%</p> <p>回収率 尿 約 85%</p> <p>前処理:加水分解、C18 カラム精製 キットインキュベーション:2 時間 30 分</p>
<p>ジエチルスチルベストロール (DES)</p> <p>感度 尿 200ppt</p> <p>標準液 12.5、25、50、100、200ppt</p> <p>交差反応 Diethylstilbestrol (DES) 100% Hexestrol 22% DES-glucuronide 68% Dienestrol &lt;1.0% 17β-Estradiol &lt;0.01%</p> <p>回収率 尿 85%</p> <p>前処理:尿=加水分解、C18 カラム精製 胆汁・筋肉・肝臓も別法で可 キットインキュベーション:2 時間 30 分</p>	<p>ゼラノール</p> <p>感度 尿 220ppt</p> <p>標準液 31.25、125、500、2,000、8,000ppt</p> <p>交差反応 Zeranol 100% α-Zearalenol 21.1% β-Zearalenol 2.5% Zearalanone 2.4%</p> <p>回収率 尿 67%</p> <p>前処理:尿=加水分解、C18 カラム精製 肝臓・腎臓も別法で可 キットインキュベーション:2 時間 30 分</p>
<p>テストステロン</p> <p>感度 血漿 20ppt</p> <p>標準液 50、200、800、3,200、12,800ppt</p> <p>交差反応 Testosterone 100% 17β-Nortestosterone 10% 17β-Trenbolon</p> <p>回収率 血漿 約 85%</p> <p>前処理:抽出、凍結乾燥 筋肉も別法で可 キットインキュベーション:2 時間 30 分</p>	<p>19-ノルテストステロン</p> <p>感度 尿 800ppt 肉 400ppt</p> <p>標準液 200、600、1,800、5,400、16,200ppt</p> <p>交差反応 19-Nortestosterone 17β 100% 19-Norandrostendione 100% 19-Nortestosterone 17α 80% 19-Norethisterone 74% 15α,16α-Methylene-19NT-17β -acetate 71% 18-Methyl-19NT-17β 59% 17α-Ethyl-19NT-17β 40% Trenbolone 10%</p> <p>回収率 尿 約 85%</p> <p>前処理:尿=加水分解、肉=t-butylmethylether 抽出、C18 カラム精製 キットインキュベーション:2 時間 30 分</p>

本品は食品衛生・環境等に関わる自主検査用キットであり、臨床検査等診断に用いることはできません。必ず取扱説明書等をご覧頂き、使用・保管・廃棄等の方法には充分ご注意ください。なお、価格・仕様など、内容を予告無く変更する場合があります。

アジマックス株式会社 <http://www.azmax.co.jp/> E-mail:sales@azmax.co.jp  
東京営業所 〒104-0032 東京都中央区八丁堀 1-10-7 Tel 03-5543-1630 Fax 03-5543-0312

**食品・飼料・環境検査キット <きつとセーフ> シリーズ**

<p>メチルテストステロン</p> <p>感度 尿 200ppt</p> <p>標準液 50、150、450、1,350、4,050ppt</p> <p>交差反応 Methyltestosterone 100% Testosterone 40% 17<math>\alpha</math>-Methylandrostan-17<math>\beta</math> ol-3-one 28% 1,4-Androstadien-17<math>\alpha</math>-methyl-17<math>\beta</math> ol-3-one 26.3% 1-Dehydrotestosterone 16.2% 5<math>\alpha</math>-Androstan-17<math>\beta</math> ol-3-one 13.1% 5<math>\alpha</math>-Androstan-2-oxa-17<math>\alpha</math>-methyl-17<math>\beta</math> ol-3-one 4.6% 19-Nortestosterone 3.2%</p> <p>回収率 尿 90<math>\pm</math>10%</p> <p>前処理:加水分解、C18 カラム精製 キットインキュベーション:12-16 時間 30 分</p>	<p>トレンボロン</p> <p>感度 尿 100ppt</p> <p>標準液 25、50、100、200、400ppt</p> <p>交差反応 17<math>\beta</math>-Trenbolone 100% Trendione 100% 17<math>\alpha</math>-Trenbolone 82% 17<math>\beta</math>-Trenbolone-glucuronide 82% 17<math>\alpha</math>-Trenbolone-glucuronide 7%</p> <p>回収率 尿 85%</p> <p>前処理:尿=加水分解、C18 カラム精製 胆汁・筋肉・肝臓も別法で可 キットインキュベーション:2 時間 30 分</p>
<p>クレンブテロール Fast</p> <p>感度 筋肉 40ppt、血清 100ppt</p> <p>標準液 100、300、900、2,700ppt</p> <p>交差反応 Clenbuterol 100% Brombuterol 150% Mabuterol 86% Terbutalin, Salbutamol 10% Cimaterol 6% Carbuterol 4%</p> <p>回収率 尿 90%</p> <p>前処理:尿=不要 筋肉等=C18 カラム精製 キットインキュベーション:1時間</p>	<p>クレンブテロール</p> <p>感度 尿 100ppt</p> <p>標準液 100、300、900、2,700、8,100ppt</p> <p>交差反応 Clenbuterol 100% Brombuterol 130% Mabuterol 86% Terbutalin, Salbutamol 10% Cimaterol 6% Carbuterol 4%</p> <p>回収率 尿 90%</p> <p>前処理:尿=不要 筋肉等=C18 カラム精製 キットインキュベーション:16時間 30 分</p>

本品は食品衛生・環境等に関わる自主検査用キットであり、臨床検査等診断に用いることはできません。必ず取扱説明書等をご覧頂き、使用・保管・廃棄等の方法には充分ご注意ください。なお、価格・仕様など、内容を予告無く変更する場合があります。


**アジマックス株式会社** <http://www.azmax.co.jp/> E-mail:sales@azmax.co.jp

東京営業所 〒104-0032 東京都中央区八丁堀 1-10-7 Tel 03-5543-1630 Fax 03-5543-0312

**食品・飼料・環境検査キット <きつとセーフ> シリーズ**

<b>所要時間 保存条件</b>	キット操作 約 2.5 時間 但しキットによる。 4～8℃
<b>操作</b>	<p>キットにより異なります。また、予告なく仕様変更される場合があります。必ずキット取扱説明書でご確認下さい。以下は参考例です。</p> <p>Fast クレンブテロールなど</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>①各ウェルに試料(標準)20μL、酵素複合体 100μL を滴下し振とうする。</li> <li>② 室温で 30 分間インキュベート。ウェル内の液を廃棄後、蒸留水で3度洗浄。</li> <li>③各ウェルに基質液・発色源液を 50μL ずつ滴下して振とうする。</li> <li>④ 室温で 15 分間インキュベート。</li> <li>⑤各ウェルに反応停止液を 100μL ずつ滴下して振とうする。</li> <li>⑥吸光度を測定する。標準液ウェルの吸光度から検量線を取り、試料の濃度を換算定量する。</li> </ol> <p>17β エストラジオール、エチニルエストラジオール、トレンボロンなど</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>①各ウェルに酵素複合体 50μL、試料(標準)20μL、抗体液を 50μL ずつ滴下し振とうする。</li> <li>② 室温で2時間インキュベート。ウェル内の液を廃棄後、蒸留水で3度洗浄。</li> <li>③各ウェルに基質液・発色源液を 50μL ずつ滴下して振とうする。</li> <li>④ 室温で 30 分間インキュベート。</li> <li>⑤⑥同じ</li> </ol>
<b>その他必要 機器 試薬</b>	<p>マイクロプレート(ストリップ)用フォトメーター(450nm)、マイクロピペット、前処理抽出用器具(遠心分離器、エバポレーター、シェーカーなど)、必要に応じ C18 カラムなど</p> <p>蒸留水、必要に応じ抽出溶媒</p> <p>RIDA スクリーン C18 カラム (100 個) (65C1P) 24,000 円</p>

**ELISA(酵素免疫測定)法の原理(競合法・二重抗体)**

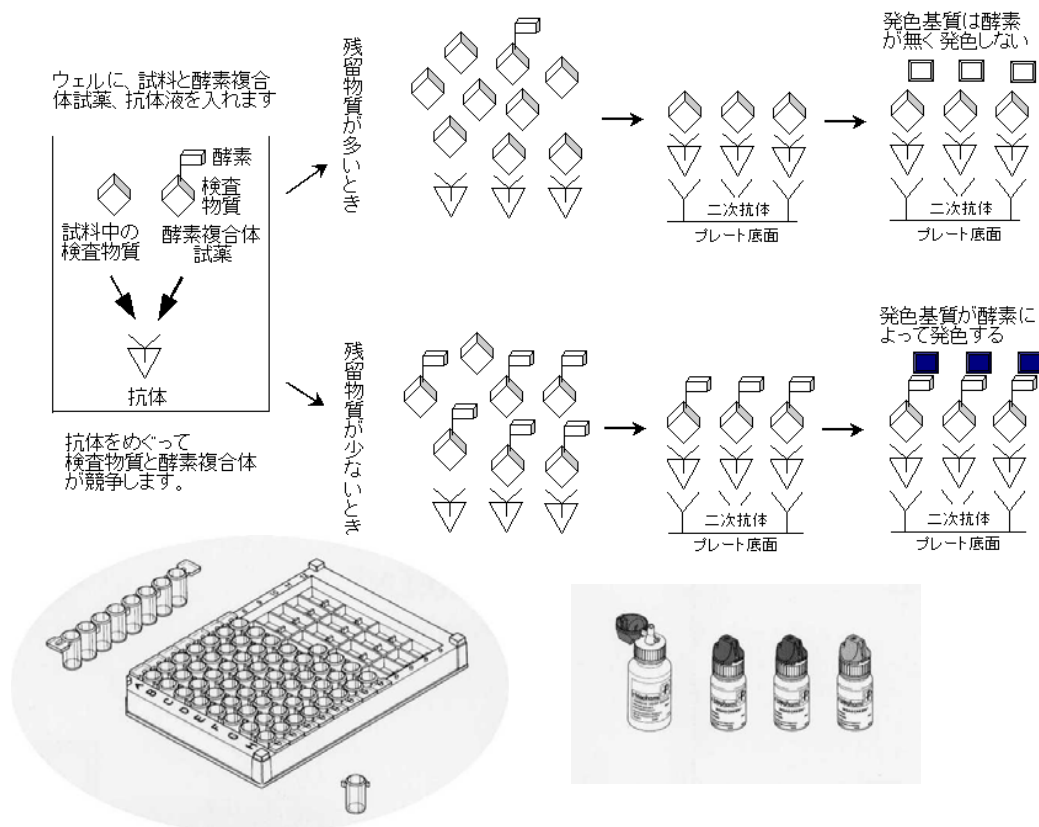

本品は食品衛生・環境等に関わる自主検査用キットであり、臨床検査等診断に用いることはできません。必ず取扱説明書等をご覧頂き、使用・保管・廃棄等の方法には充分ご注意ください。なお、価格・仕様など、内容を予告無く変更する場合があります。

アジマックス株式会社 <http://www.azmax.co.jp/> E-mail: [sales@azmax.co.jp](mailto:sales@azmax.co.jp)  
 東京営業所 〒104-0032 東京都中央区八丁堀 1-10-7 Tel 03-5543-1630 Fax 03-5543-0312